


SEAGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

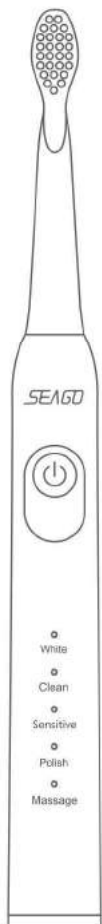

SZCZOTECZKA SONICZNA

SG-2303

Ważne zagadnienia

- Często zdarza się że osoby które korzystają ze szczoteczki sonicznej po raz pierwszy czują dyskomfort, laskotania etc. Nie przejmij się, to normalne. Działła muszą się przyzwyczaić do drgań jakie odczuwa podczas szczotkowania. Po kilku użyciach uczucie minie.

- Nie otwieraj szczoteczki we własnym zakresie oraz nie próbuj jej sam naprawiać.

- Jeśli produkt posiada jakies defekty, przestań z niego korzystać.


- Szczoteczkę należy ładować zasilaczem o maksymalnym natężeniu 5V 1A. Użycie szybkich ładowarek bądź ładowarek innych niż zalecane powyżej może skutkować uszkodzeniem szczoteczki.

- Jeśli twoje dziąsła podczas szczotkowania krwawią, skonsultuj korzystanie ze szczoteczki sonicznej ze swoim dentystą

- Przechowuj urządzenie z dala od wysokich temperatur oraz bezpośredniego słońca



Montaż i demontaż końcówki szczoteczki

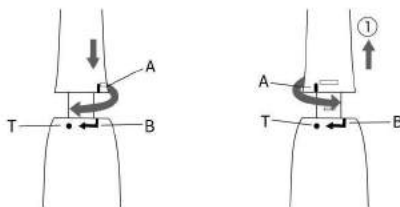

Aby zamontować nową końcówkę umieść punkt A na wysokości punktu B i przekręć w stronę T

Korzystanie ze szczoteczki

1. Podłącz kabel do zasilania aby naładować sprzęt przed pierwszym użyciem.
2. Podłącz główkę szczoteczki i upewnij się że jest poprawnie zamontowana i zablokowana. Zwilż końcówkę oraz nałóż pastę do zębów.
3. Delikatnie umieść główkę szczoteczki na zębach.
4. Wykonuj delikatne ruchy po zębach, nie musisz mocno dociskać szczoteczki do zębów.
5. Możesz wybrać jeden z pięciu trybów pracy szczoteczki. Możesz dowolnie korzystać z trybu który pasuje Ci najbardziej. Szczoteczka co 30 sekund zasygnalizuje Ci aby przejść do mycia kolejnej partii zębów. Po 2 minutach szczoteczka wyłączy się automatycznie.

Ladowanie urządzenia

Szczoteczka posiada 5 poziomów naładowania urządzenia.

- 1 poziom oznacza że szczoteczka naładowana jest w 20%
- 2 poziom - 20-40%
- 3 poziom - 50-60%
- 4 poziom - 60-80%
- 5 poziom 80-100%

Pamiętaj aby przed 1 użyciem naładować do pełna urządzenie. Czasem bateria w szczoteczce przechodzi w tryb uśpienia jeśli sprzęt nie był przez pewien czas włączany. Wtedy szczoteczka potrzebuje około 5-10 minut aby sygnalizator LED zaczął się świecić.

Parametry techniczne

Model:SG-2303

Working temperature:5-40°C

Input Voltage :5V =

Charging time:≤4hours

Input Power :1.5W

Origin: China

Operative standard:GB4706.59-2008

GB4706.1-2005